

**Definicije simbola**

	Proizvođač		Sterilisano zračenjem		Konsultujte uputstvo za upotrebu u štampanom ili elektronskom obliku
	Ovlašćeni zastupnik u Evropskoj zajednici		Kataloški broj		Oprez
	Datum proizvodnje		Ne koristite ako je pakovanje oštećeno, konsultujte uputstvo za upotrebu		Medicinsko sredstvo
	Rok trajanja		Za jednokratnu upotrebu		Jedinstveni identifikator sredstva
	Šifra serije		Ne sterilizujte ponovo		MR uslovno
	Sistem dvostruke <i>sterilne</i> barijere				

**OPIS**

Ossis hirurški instrumenti su dizajnirani za obavljanje specifičnih funkcija kao što su pričvršćivanje, sečenje i bušenje. Ossis hirurški instrumenti se mogu koristiti i za lakšu ugradnju hirurških implantata.

**MATERIJALI**

Ossis hirurški instrumenti su proizvedeni od nerđajućeg čelika.

**PREGLED**

Pre otvaranja proverite ima li oštećenja na pakovanju ili pečatu. Sterilnost je zagarantovana samo ako je pakovanje neoštećeno ili neotvoreno. Pažljivo proverite ima li oštećenja na instrumentu. Oštećeni ili neispravni instrumenti se ne smeju koristiti. Ako je oštećen, nemojte ga koristiti i obratite se proizvođačevoj korisničkoj službi ili lokalnom predstavniku prodaje radi zamene.

**UPOZORENJA**

- Nemojte ponovo koristiti hirurške instrumente označene kao samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba može negativno uticati na radne karakteristike instrumenta.
- Ne koristite alate za sečenje koji su deformisani, korodirani, oštećeni ili istrošeni. Za bezbednu upotrebu, sa instrumenta se prvo moraju ukloniti slomljene ili tupe rezne ivice.
- Ne izlažite instrumente prekomernoj sili i / ili udaru jer može doći do lomljenja.
- Hirurški pribor kao što su burgije, sečiva, glodala, dleta, šrafovi, igle za punkciju i razvrtči smeju da koriste samo obučeni medicinski stručnjaci koji su poznati sa njihovom upotrebom i primenom.
- Proverite da li je hirurški pribor pravilno umetnut i pritegnut pre aktivacije instrumenta kako biste izbegli distalnu migraciju i moguće povrede.
- Osetljive strukture u blizini operativnog polja moraju biti zaštićene.

**MERE OPREZA**

- Koristite aseptičku tehniku otvaranja pakovanja pri isporuci medicinskog sredstva u sterilno polje.
- Medicinska sredstva zahtevaju posebno rukovanje da bi se sprečilo oštećenje. Kao i kod svih medicinskih sredstava, treba voditi računa da se na instrument ne primeni prekomerna sila. Prekomerna sila može dovesti do kvara instrumenta.
- Hirurzi moraju biti vešti u korišćenju hirurških instrumenata za sečenje.
- Upotreba instrumenta na bilo koji način ili za medicinski postupak za koji nije osmišljen i naveden može dovesti do oštećenja ili lomljenja.
- Lomljenje burgije se najčešće javlja pri radu oko metalnih implantata (delovi proteza, sredstva za unutrašnju fiksaciju, itd). Da biste smanjili mogućnost nastanka takvih incidenata, uverite se da vrh burgije ne dodiruje implantat. U slučaju lomljenja i prisustva fragmenata burgije, sledite odgovarajući protokol ortopedске hirurgije.

**OGRANIČENA GARANCIJA**

Garantuje se da su materijal, funkcija i izrada proizvoda odgovarajući za upotrebu na pacijentima. Proizvođač nije odgovoran, izričito ili podrazumevano, za štetu koja može nastati ili je može izazvati klijent ili bilo kog korisnika proizvoda, kao rezultat:

- Nenamenske upotrebe, pogrešnog rukovanja i/ili nepravilnog rada.
- Korišćenja na načine ili za medicinske postupke za koji nije osmišljen.

OVA GARANCIJA MENJA SVE DRUGE GARANCIJE, IZRIČITE, PODRAZUMEVANE I/ILI ZAKONSKE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, GARANCIJE O UTRŽIVOSTI, PPRIKLADNOSTI I/ILI ODGOVORNOSTIMA PROIZVOĐAČA.

**REKLAMACIJE PROIZVODA**

Sva pitanja ili nedoumice u vezi sa kvalitetom, pouzdanošću i/ili trajnošću ovog proizvoda treba uputiti korisničkoj službi proizvođača ili ovlašćenom predstavniku proizvođača. Obratite se korisničkoj službi ili ovlašćenom predstavniku radi ovlašćenja povraćaja.

**ISPORUKA**

Isporučuje se sterilno. Sterilnost je zagarantovana, osim u slučaju da je pakovanje oštećeno ili otvoreno. Samo za profesionalnu upotrebu.


**SKLADIŠTENJE**

Čuvati u zatvorenom prostoru bez prašine, dalje od direktne sunčeve svetlosti i ispod 30 °C (86 °F). Održavajte raspon relativne vlažnosti između 20% – 80%.

**PONOVNA STERILIZACIJA**

Korisnik sme da sterilizuje samo kompletne instrumenata za višekratnu upotrebu, i oni se po potrebi mogu ponovo sterilisati autoklaviranjem parom u odgovarajućem zaštitnom omotu. Za ova sredstva se preporučuju sledeći parametri procesa: Ručno čišćenje: 10 l vode (maksimalne temperature 35 °C) dozirano sa 4ml/l sredstva Viruzyme V. Zatim, automatsko čišćenje: Pretpranje hladnom vodom (3 min). Pranje: Neutralni enzimski rastvor (Amity Viruzyme-V) doziran na 4ml/l (192 ml) pri 60 °C, 12 min. Ispiranje: Ulazna topla voda, 1 min. Termička dezinfekcija: Povratna osmoza vode, 93 °C tokom 1 min, 0,3 ml/l (14, 4 ml) pH neutralnog sredstva za ispiranje. Sterilizacija: Uklanjanje vazduha, 4 minuta na 134 C, zatim 20 minuta sušenja.

**Austofix**  
 (Australian Orthopaedic Fixations Pty Ltd) 18 Kinkaid Ave  
 North Plympton  
 SA 5037 AUSTRALIA  
 Tel: +61 8 8351 0644  
 Faks: +61 8 8351 0855  
 info@austofix.com.au  
 www.austofix.com Proizvedeno u  
 Australiji

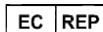

Advana Ltd. Tower Business Centre,  
 2nd Flr., Tower Street, Swatar,  
 BKR 4013 Malta

**700023 Ossis instrumenti  
 za jednokratnu upotrebu  
 rev. 1**

